

MEDBOX PLUS HŐMÉRSÉKLET KRITIKUS SZÁLLÍTMÁNYOK CSOMAGOLÁSÁRA

LEÍRÁS

Alkalmazása közúti- illetve légiszállítású hőmérséklet kritikus szállítmányok szárazjégbe csomagolásával ajánlott elsősorban klinikai kísérletek esetén (megfelel az ADR és IATA előírásoknak).

A MEDBOX PLUS ELŐNYEI:



- ❖ Professzionális megjelenés
- ❖ Teljes megoldás egy csomagban.
- ❖ Egyszerű kezelhetőség.
- ❖ Egyediesítés lehetséges.
- ❖ Előírásoknak megfelel.
- ❖ RFID-vel (nyomkövető) bővíthető

EGY KOMPLETT „MEDBOX PLUS” RÉSZEI:



- ❖ 1 fehér kartondoboz felirattal
- ❖ 1 EPS-doboz egyedi rögzítéssel
- ❖ 1 Simítózáras tasak, amiben a készlet darabjai vannak
- ❖ 3 Szivárgásmentes 95kPa Lab-Sealbag® tasak (szárazjéghez megfelelő).
- ❖ 3 Szabadalmaztatott kartonpapír rögzítő .
- ❖ 3 nedvszívó lap (12x14cm)
- ❖ 1 angol nyelvű használati utasítás

MÉRETEK, JELLEMZŐK:


- ❖ A Medbox külső kartonjának méretei: (Hosszúság x szélesség x magasság:) 380 x 380 x 400 mm.
- ❖ A belső EPS-doboz méretei: Hosszúság 300 x szélesség 300 x magasság 280 mm.
- ❖ A Medbox legfeljebb 16 kg szárazjeget tartalmazhat.
- ❖ 100 órán át fagyasztva tartja a szállítmányt (tesztelve és ellenőrizve; 13,3 kg szárazjeget véve alapul.)
- ❖ Legfeljebb 120 db 3,5 ml-es fiola tárolására tervezve

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatóságos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.

Használati útmutató



1. Töltse meg a Sealbag® tasakot és tegye bele a nedzszívót! Ne tegyenek szárazjeget a Sealbag@tasakba!

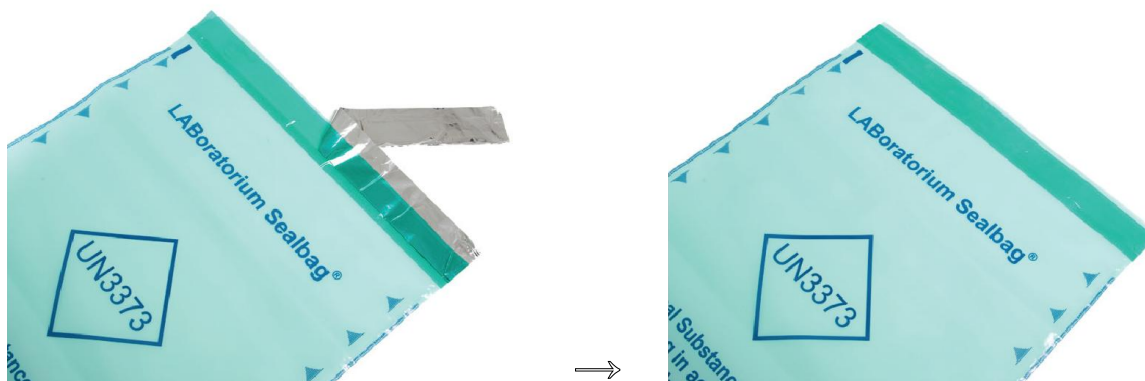

2. Szedje le a linert a Sealbag® tasak szájáról és zárja le a tasakot !



3. Rögzítse a Sealbag® tasakot az összehajtott kartonlap közé és rögzítse az egészet az EPS-dobozba !



4. Töltse meg az EPS-dobozt szárazjéggel!